




ヘッドイモバイザーとスピードストラップを取り付けた状態



傷病者を搬送するための担架です。

正しく使うために、講習会などを受けてから使用してください。

セット内容

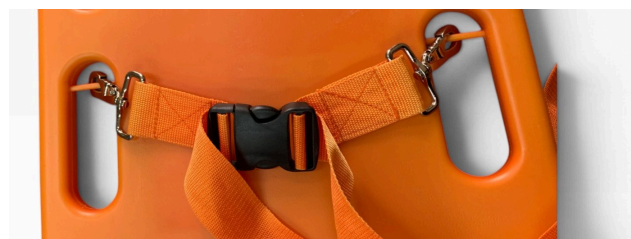

① スパインボード ×1台

傷病者を乗せます。

② スピードストラップ ×3本

傷病者の身体を固定します。

③ ヘッドイモバイザー ×1セット

頭部を固定して、頸椎の動きを制限します。次の部品の組み合わせです。



ベースパッド ×1枚



ベースストラップ ×2本
ベースパッドをボードに固定
します



タイトベルト ×2本
頭部を固定します(額・顎)



ヘッドブロック
左右 各1個

サービス品

簡易ループストラップ(オレンジ)×2本

予備・多用途。傷病者の腕や手首の固定のほか、補助的な固定に使います。

※ スパインボードの箱に同梱しています。

ヘッドイモビライザーの取り付け(写真)



取り付け状態(ボードの頭側)

ベースパッドの上にヘッドブロックを置き、
タイトベルトで留めています。

ボードの裏側

ベースストラップ2本で、
ベースパッドをボードに固定しています。

ベルトの留め方

ベルトをボードの穴に通し、Dカン(D字形のプラスチックの留め具)に通して、
面ファスナー(マジックテープ)で留めます。



ボードの穴に通す



Dカンに通す



面ファスナーで留める